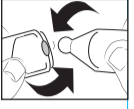



FRONT COPY

TEXT DIRECTION







blink®
intensive
beruhigende Augentropfen
gocce oculari lubrificanti
20 x 0.4ml

DE **Langanhaltende Linderung bei Trockenheitsgefühl am Auge und müden Augen**
Moderne, feuchtigkeitsspendende Augentropfen mit spezieller Formulierung zur Beruhigung bei trockenen, gereizten oder angestrengten Augen.
Indikationen
Für gereizte, müde Augen. Zur Anwendung bei Kontaktlinsen geeignet.
Kontraindikationen
Keine Kontraindikationen bekannt.
Anwendung
• Nach Bedarf 1 bis 2 Tropfen in das betroffene Auge geben
• Mehrmals blinzeln, um das Auge zu spülen
• So oft wie nötig anwenden
• Kontaktlinsen müssen nicht herausgenommen werden
Vorsichtsmaßnahmen
• Immer nur frische Lösung anwenden
• Bei beschädigtem Dosierbehälter nicht verwenden
• Die Lösung nicht schlucken
• Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden
• Um Kontamination zu vermeiden, die Behälterspitze an keiner Stelle berühren und nicht direkt das Auge berühren
• Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
• Für Kinder unzugänglich aufbewahren
• Bei 5 °C bis 25 °C lagern
• Nach Verwendung Behälter und restliche Lösung unverzüglich entsorgen
• Mögliche Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen, die grundsätzlich beim Gebrauch von Augentropfen auftreten können: Allergische Reaktionen, Entzündungen oder Infektionen
Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Augenspezialisten.
Nebenwirkungen
Keine Nebenwirkungen bekannt.
Enthält:
Polyethylenglykol 400 (PEG 400) – 0,25 %
Natriumhyaluronat – 0,20 %
Borsäure
Natriumborat (Decahydrat)
Natriumchlorid
Kaliumchlorid
Kalziumchlorid (Dihydrat)
Magnesiumchlorid
Gereinigtes Wasser

IT **Sollievo duraturo da secchezza e stanchezza oculare**
Gocce oculari lubrificanti espressamente formulate per fornire protezione e confort da secchezza, irritazione o fastidio oculare.
Indicazioni
Sensazione di fastidio ed irritazione oculare. Può essere usato con lenti a contatto.
Controindicazioni
Nessuna controindicazione nota.
Istruzioni per l'uso
• Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio interessato secondo necessità
• Battere le palpebre alcune volte per lubrificare l'occhio
• Usare il prodotto con la frequenza necessaria
• Se si indossano lenti a contatto, non è necessario rimuoverle
Precauzioni
• Utilizzare sempre soluzione fresca
• Non utilizzare il prodotto se il contenitore della dose unitaria è danneggiato
• Non ingerire la soluzione
• Non utilizzare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti
• Per evitare contaminazioni, non toccare con l'estremità del contagocce alcuna superficie ed evitare il contatto con l'occhio.
• Non utilizzare dopo la data di scadenza
• Tenere fuori dalla portata dei bambini
• Conservare a una temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C
• Eliminare il contenitore ed eventuale soluzione rimanente immediatamente dopo l'uso
• I possibili rischi, effetti indesiderati o complicanze generalmente associati all'uso delle gocce oculari sono: reazioni allergiche, reazioni infiammatorie o infezioni
Se i problemi persistono, rivolgersi al proprio specialista di fiducia.
Effetti indesiderati
Nessun effetto indesiderato noto.
Contiene:
Polietilenglicolo 400 (PEG 400) – 0,25%
Ialuronato di sodio – 0,20%
Acido bórico
Sodio borato (decaidrato)
Cloruro di sodio
Cloruro di potassio
Cloruro di calcio (diidrato)
Cloruro di magnesio
Acqua purificata

Simbole • Simboli

 Gebrauchsanweisung beachten Leggere le istruzioni per l'uso	 Hersteller Fabricante	LOT Chargen-Bez. Numero di lotto	 Verwendbar bis Scadenza	 25°C Temperatur- begrenzung Limiti di temperatura 5°C
STERILE A Sterile-Aseptische Technik Sterile-Tecnica asettica	 Nicht wiederverwenden Non riutilizzare	 Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist Non utilizzare se la confezione è danneggiata		

CE 0123 **STERILE A**

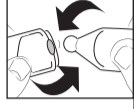

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
blink is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

BACK COPY

ISSUED

TEXT DIRECTION




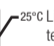


blink®
intensive
gouttes ophtalmiques lubrifiantes
verzachtende oogdruppels
20 x 0.4ml

FR **Soulagent durablement de la sensation de fatigue et de sécheresse oculaires**
Gouttes ophtalmiques lubrifiantes spécialement formulées pour soulager et apporter un confort aux yeux secs ou irrités.
Indications
Sensation d'inconfort, yeux irrités. Peuvent être utilisées avec les lentilles de contact.
Contre-indications
Aucune contre-indication n'est connue.
Mode d'emploi
• Placer 1 ou 2 gouttes dans l'œil, selon les besoins
• Cligner plusieurs fois pour laver l'œil
• Utiliser aussi souvent que nécessaire
• Si vous portez des lentilles de contact, il n'est pas nécessaire de les enlever
Précautions
• Toujours utiliser une dosette neuve
• Ne pas utiliser si la dosette est endommagée
• Ne pas avaler la solution
• Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
• Pour éviter tout risque de contamination, se garder de tout contact avec l'embout de l'unidose et éviter le contact avec les yeux
• Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation
• Garder hors de la portée des enfants
• À conserver entre 5 °C et 25 °C
• Jeter la dosette et toute solution restante immédiatement après usage
• Les risques, effets indésirables ou complications éventuellement associés aux gouttes ophtalmiques sont : réaction allergique, réaction inflammatoire ou infections
Si les problèmes persistent, veuillez consulter votre spécialiste.
Effets indésirables
Aucun effet indésirable n'est connu.
Composition :
Polyéthylenglycol 400 (PEG 400) – 0,25 %
Hyaluronate de sodium – 0,20 %
Acide borique
Borate de sodium (décahydrate)
Chlorure de sodium
Chlorure de potassium
Chlorure de calcium (dihydrate)
Chlorure de magnésium
Eau purifiée

NL **Langdurige verlichting van het gevoel van droge, vermoeide ogen**
Een geavanceerde, bevochtigende oogdruppel speciaal voor het verzachten van droge, geïrriteerde of pijnlijke ogen.
Indicaties
Geïrriteerde, oncomfortabel voelende ogen. Mag in combinatie met contactlenzen gebruikt worden.
Contra-indicaties
Geen bekende contra-indicaties.
Gebruiksaanwijzing
• Naar behoefte 1 à 2 druppels in het oog doen
• Een paar keer knipperen om het oog te spoelen
• Zo vaak als nodig gebruiken
• Als u contactlenzen draagt, hoeft u ze niet uit te nemen
Voorzorgsmaatregelen
• Altijd verse vloeistof gebruiken
• Niet gebruiken als de houder van de eenheidsdosis beschadigd is
• De vloeistof niet inslikken
• Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen
• Om contaminatie te voorkomen mag de tip van de houder geen enkel oppervlak of het oog rechtstreeks aanraken
• Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
• Buiten bereik van kinderen houden
• Bewaren tussen 5-25 °C
• De houder en de resterende oplossing onmiddellijk na gebruik weggooiden
• Mogelijke risico's, bijwerkingen of complicaties die over het algemeen gepaard gaan met oogdruppels zijn: allergische reactie, ontstekingsreactie of infecties
Als u problemen blijft hebben, bespreek die dan met uw oogarts.
Bijwerkingen
Geen bekende bijwerkingen.
Bevat:
Polyethyleenglycol 400 (PEG 400) – 0,25%
Natriumhyaluronaat – 0,20%
Boorzuur
Natriumboraat (decahydraat)
Natriumchloride
Kaliumchloride
Calciumchloride (dihydraat)
Magnesiumchloride
Gezuiverd water

Simboles • Symbolen

 Consulter le mode d'emploi Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	 Fabricant Fabrikant	LOT Numéro de lot Lotnummer	 Date limite d'utilisation Uiterste gebruiksdatum	 25°C Limites de température Temperatuur- beperking 5°C
STERILE A Stérile-Teknik aseptique Steriel. Aseptische techniek	 Ne pas réutiliser Niet opnieuw gebruiken	 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is		

AM70507GM12D
Revision Date: 05/2018

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC Annex XII.

INSERT 240mm x 140mm
(HOLOPACK)
PENCIL FOLD

AM01699

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

DC • Labeling & Packaging																	
Artwork Specifications																	
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																
Last Update: 03/05/2018 - 10.00 v1																	
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.																	
INK(S)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												BLACK				
			BLACK														